

Tibbi vasitənin istifadəsi üzrə təlimat

Tibbi vasitə

Təsviri

Blue Gel A Free hialuron turşusunun natrium duzu (FHA 1.0) və aminturşulardan ibarət olan konservantsız, steril izotonik oftalmoloji məhlul olub, gözyaşı ifrazını və gözyaşardıcı təbəqənin funksiyasını bərpa edir.

Blue Gel A Free göz səthinə qoruyucu və lubrikant təsir göstərir, onu mexaniki, ətraf mühitin mənfi təsirlərindən və görmə stresindən qoruyur. Kornea - konyunktival nəmlənmənin ciddi azalması halında da bu vasitədən istifadə edilir.

Hialuron turşusu insan gözündə mövcud olan mukopolisaxarid olub, göz səthinə yapışaraq ona qoruyucu və lubrikant təsir göstərir. Bu xüsusiyyətləri sayəsində göz səthində uzun müddət qalır və lakrimal təbəqəni stabiləşdirir.

Amin turşusu törəmələri göz səthinə lubrikant təsir göstərir və göz epitelini müxtəlif növ streslərdən qorumağa kömək edir.

Blue Gel A Free şüşəsinə OSD (Oftalmik Sıxma Dispenseri) quraşdırılmışdır ki, bu da çox qatlı hava filtri və uc möhürləyici valf sistemi sayəsində məhsulun sterilliyinin qoruyucu maddələr olmadan saxlanmasını təmin edir.

İstifadəsinə göstərişlər

BLU Gel A Free gözə nəmləndirici, qoruyucu və lubrikant təsir göstərməklə göz yaşı fəaliyyətinin pozulması zamanı təyin edilir.

İstifadə qaydası və dozası

Konyunktiva kisəsinə 1-2 damcı gündə 3 dəfə və ya daha çox damızdırılır.


Kontakt linzalardan istifadəsi zamanı da məhsulu damızdırmaq olar.

Əks göstərişlər

Məhsulun tərkibindəki komponentlərdən hər hansına birinə və ya kimyəvi cəhətdən ona yaxın maddələrə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə metodu

- İlk istifadə zamanı yan lövhədən çəkərək qapağı möhürləyən plastik halqanı qoparın (1).
- Qapağı çıxarın (2).
- Flakonu gözün üstünə çevirin və damla (3) düşənə qədər işarə və baş barmağınızla şüşəyə artan təzyiq göstərin. Şüşə içərisindəki məhlul tükəndikcə daha çox güc tələb oluna bilər (4).
- İstifadə etdikdən sonra şüşənin qapağını yenidən bağlayın (5).

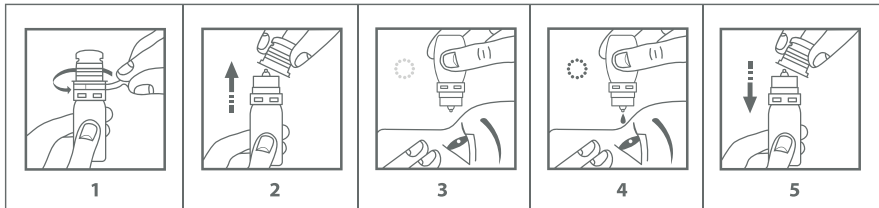

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

- Məhsul yalnız xaricə, otalmoloji istifadə üçündür.
- Məhlulun çirklənmə riskinin qarşısını almaq üçün damcıtokənin gözə və ya digər səthlərə təmas etmədiyindən əmin olun.
- Göz səthinin zədələnməməsi üçün damcıtokənin gözlə təmasına yol verməyin.
- Şüşədə olan məhlul bitdikdə, damcı yaratmaq üçün daha çox güc tətbiq olunmalıdır.
- İstifadə etdikdən sonra məhsulun qapağını kip bağlayın.
- Başqa bir oftalmoloji vasitə ilə birgə istifadə edildiyi halda həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.
- Flakonun OSD (Oftalmik Sıxma Dispenseri) zədələnməmişdirsə, məhsuldan istifadə etməyin.
- Məhsulu uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

Əlavə təsirləri

Məhsulun istifadəsindən sonra əlavə təsirlər müəyyən edilməyib. Əlavə təsirlər meydana gəltdiyi halda, məhsuldan istifadə etməyi dayandırın və həkimlə məsləhətləşin. İstifadədən sonra gözdə yüngül yanma hissi və müvəqqəti görmə narahatlığı yarana bilər.

Tərkibi

Təsiredici maddələr: Natrium hialuronat (Sodium Hyaluronate) – 0,30% (FHA 1.0).

Köməkçi maddələr: Bor turşusu (Boric acid), Dinatrium tertaborat dekahidrat (Disodium tetraborate decahydrate), Natrium xlorid (Sodium chloride), Qlisin (Glycine), L- leysin (L- Leucine), L-lizin hidroxlorid (L- Lysine hydrochloride), L-Prolin (L-Proline), İnyeksiya üçün su (Water for injection).

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yüksək olan temperaturda saxlanmayın. Qablaşma üzərində göstərilən yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etməyin. Məhsul qapağı açıldıqdan sonra qablaşmada göstərilən son istifadə tarixinə qədər yararlıdır.

İstifadə etdikdən sonra ətraf mühitə atmayın.

İstifadə üzrə təlimatın ən son yenilənmə tarixi: İyun 2020

- Xəbərdarlıq
- İstifadə təlimatına baxın
- İstifadə
- Seriya
- Qablaşma zədələnməmişdirsə, istifadə etməyin
- Aseptik texnika istifadə edilərək emal edilmişdir
- Yuxarı temperatur həddi
- İstehsalçı
- İstifadə etdikdən sonra ətraf mühitə atmayın

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italia
Tel. +39 049 8232111
www.fidiapharma.com

Description

BLU GEL A free is an isotonic sterile ophthalmic solution with hyaluronic acid sodium salt (FHA 1.0), and amino acids, preservative free, aimed at complementing tear secretion and restoring tear film physiology.

BLU GEL A free protects and lubricates the surface of the eye, providing relief from mechanical, environmental, and visual stress, or in the event of severe reduction in corneal-conjunctival lubrication.

Hyaluronic acid is a mucopolysaccharide physiologically present in the human eye and has the property of adhering to the surface of the eye protecting and lubricating it. Thanks to its mucoadhesive properties, it remains on the surface of the eye for a long time and stabilises the tear film.

The amino acid formulation helps lubricate the surface of the eye and improve the protection of epithelia subject to various kinds of stresses.

The BLU GEL A free bottle is fitted with an OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) dropper which, through its multi-layer air filter and tip-seal valve system, ensures that the sterility of the product is maintained without preservatives.

Indications

BLU GEL A free is indicated in severe tear dysfunction syndrome for hydration and lubrication of the surface of the eye.

Dosing regimen and method of administration

Apply 1-2 drops to the conjunctival sac 3 or more times a day.


The product may be instilled into the eyes even when wearing contact lenses.

Contraindications

Known hypersensitivity to product components or other substances that are chemically closely related.

Instructions for use

- When first used, remove the plastic ring that seals the cap by pulling the side tab (1).
- Remove the cap (2).
- Turn the device over the eye and apply increasing pressure on the bottle with your index finger and thumb until the drop (3) comes out. As the solution in the bottle becomes depleted, more force may be required (4).
- Close the bottle again with the cap (5).

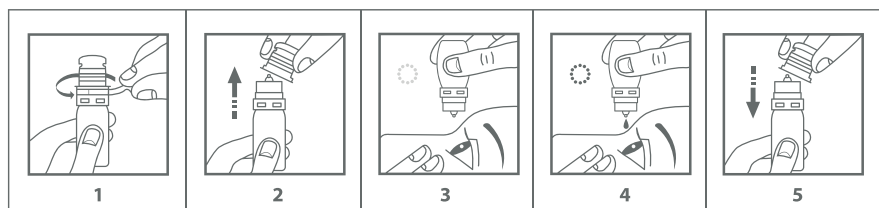

Precautions and warnings

- This product is for external ophthalmic use only.
- To eliminate the risk of contamination of the solution, make sure the dropper does not come into contact with the eye or other objects;
- To avoid damage to the surface of the eye, do not allow the dropper to come into contact with the eye during instillation.
- As the solution in the bottle runs out, more force will need to be applied to create a drop.
- Close the bottle tightly after use.
- If used alongside topical ophthalmic medicines, consult your doctor.
- Do not use the product if the OSD bottle is damaged.
- Keep the product out of the sight and reach of children.

Side effects

No undesirable effects have been reported after administration of the product. In case of adverse reactions, stop using the product and consult a physician. After application of the product, there may be a slight burning of the eye and temporary visual discomfort.

Ingredients

Main component: Sodium Hyaluronate 0.30% (FHA 1.0)

Other components: Boric acid, Disodium tetraborate decahydrate, Sodium chloride, Glycine, L-Leucine, L-Lysine hydrochloride, L-Proline, Water for injection.

Storage conditions

Do not store above 25°C. Do not use the product after the expiry date indicated on the bottle label.

After first opening, the product may be used until the expiry date indicated on the packaging.

Do not discard in the environment.

Leaflet last revision date: June 2020



Caution



Consult instructions for use



Use by



Batch code



Do not use if package is damaged



Sterile processed using aseptic techniques



Upper temperature limit



Manufacturer



Do not discard in the environment after use.



Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A

35031 Abano Terme (PD) Italia

Tel. +39 049 8232111

www.fidiapharma.com