



EYE DROPS

Lubricating ophthalmic solution with Sodium Hyaluronate and Vitamin B12

COMPOSITION:

Sodium Hyaluronate 0.3%, P-Plus[™], Vitamin B12, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Magnesium Chloride, **SCO[®]** in an isotonic buffered solution.

DESCRIPTION:

VISIONLUX[®]PLUS is a refreshing, revitalizing and lubricating ophthalmic solution, containing **Sodium Hyaluronate 0.3%**, obtained by fermentation and not of animal origin.

The activity of the **Sodium Hyaluronate** is optimised and prolonged by the synergic action of **P-Plus[™]**.

P-Plus[™] is a hydro soluble polymer with filmogenous and lubricant properties. The association of **Sodium Hyaluronate and P-Plus[™]** not only increases the viscosity of the solution but also improves its mucoadhesivity properties.

The presence of **Electrolytes** (Cl⁻, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ and Mg⁺⁺), essential for the cellular biochemical processes, helps to keep the ocular surface in good physiological conditions.

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) has anti-oxidant properties, thus protecting the ocular surface from the damage induced by reactive oxygen species (ROS). It is therefore an essential factor in the maintenance of a healthy ocular surface.

VISIONLUX[®]PLUS is preserved with a special preservative system called **SCO[®]** (Stabilized Complex Oxychloro) that keeps the solution sterile in the bottle. When exposed to light, **SCO[®]** dissipates into components naturally found in the human tears such as sodium chloride, oxygen and water, making it very well tolerated.

INDICATIONS:

VISIONLUX[®]PLUS provides long and lasting relief to the sensations of severe dry, stressed and tired eyes of pathological or non-pathological origin.

VISIONLUX[®]PLUS protects cells from damaging oxidative free radicals and replaces locally low levels of the nutrients in the tears.

VISIONLUX[®]PLUS is compatible with all types of contact lenses.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- Wash, rinse and dry your hands thoroughly.
- Make sure the seal is intact.
- To open the bottle, unscrew the top completely and break the safety seal.
- Instill 1 or 2 drops in each eye, as required, or according to the specialist's advice.
- Close the bottle tightly after use.

WARNINGS:

- To prevent possible contamination, do not let the tip of the dropper come into contact with any surface or the eye.
- Do not use in case of specific hypersensitivity towards any of the constituents.
- In some cases, slight sensitivity may cause a brief stinging or irritation upon instillation that disappears after blinking.
- Do not swallow the solution.
- Keep out of the sight and reach of children.
- After the bottle has been opened, the solution must be used within 90 days.
- Do not use after the expiry date.
- If symptoms persist, consult your eye specialist.
- Do not use if the bottle is damaged.
- **Do not expose to direct sunlight.**

STORAGE:

- Store between 5 and 35°C and protect from a direct source of light.


3 ml (free sample)

REF D3VXP103

10 ml

REF D10VXP102

STERILE A

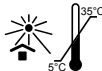

Distributor in Azerbaijan and Georgia:

BIH Pharmaceuticals Ltd

Sofia - 1404, Triadica district,
Kostenski Vodopad str.45/V/3, BULGARIA

 NOVAX[®]PHARMA

Le Coronado
20, Avenue de Fontvieille
MC 98000 - MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V4 - Rev. 19/02/2019



GÖZ DAMCISI

Natrium hialuronat və B12 Vitamini tərkibli nəmləndirici oftalmoloji məhlul

TƏRKİBİ:

Izotonik bufer məhlulda **natrium hialuronat 0,3%, P-plusTM, B12 vitamini**, natrium xlorid, kalium xlorid, kalsium xlorid, maqnezium xlorid, **SCO[®]**.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

VISIONLUX[®]PLUS fermentasiya yolu ilə alınmış qeyri heyvan mənşəli **0,3%-li natrium hialuronat** tərkibli fərahlandırıcı, bərpəedici və lyubrikant təsirli oftalmoloji məhluldur.

P-PlusTM ilə sinergik təsiri sayəsində **natrium hialuronatın** effektivin optimallaşması və daha uzun müddətli təsiri təmin olunur.

P-PlusTM suda həll olan polimer olub, gözdə qoruyucu təbəqənin əmələ gəlməsini təmin edir və lyubrikant xüsusiyyətlərə malikdir. **Natrium hialuronat** və **P-PlusTM** kombinasiyası yalnız məhlulun özlülüyünü artırır, həmçinin onun mukoadheziv xüsusiyyətlərini də artırır.

Tərkibində **elektrolitlərin** (Cl⁻, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺ və Mg⁺⁺) olması hüceyrə olan biokimyəvi proseslərin gedışində vacib rol oynayır, həmçinin göz səthinin sağlam fizioloji vəziyyətinin təmin olunmasına yardım edir.

B12 Vitamini (sianokobalamin) antioksidant xüsusiyyətləri sayəsində göz səthinin oksigenin fəal formalarının (OFF) zədələyici təsirdən qoruyur. Buna görə də, göz səthinin sağlamlığının qorunmasının təmin edilməsində mühüm faktordur.

VISIONLUX[®]PLUS -un tərkibində məhlulu flakonda steril saxlayan xüsusi **SCO[®]** (Stabilized Complex Oxychloro) birləşməsi vardır. Işıqın təsirdən **SCO[®]** natrium xlorid, oksigen və su kimi insanın göz yaşında mövcud olan təbii komponentlərə parçalanır. Bu da məhlulun xəstələr tərəfindən yaxşı keçirilməsini təmin edir.

İSTİFADƏSİ:

VISIONLUX[®]PLUS gözələrin patoloji və qeyri-patoloji quruluşunu aradan qaldırır, gərginliyini və yorğunluğunu uzunmüddətli və davamlı yüngülləşdirir.

VISIONLUX[®]PLUS hüceyrələrin sərbəst radikallarla zədələnməsinin qarşısını alır və göz yaşında aşağı səviyyədə olan qida maddələri ilə yerli əvəz edir.

VISIONLUX[®]PLUS kontakt linzalarının bütün növləri ilə uyğunlaşır.

İSTİFADƏ QAYDASI:

- Öncə əlləri təmiz yumaq və qurulmaq lazımdır.
- Əmin olmaq lazımdır ki, flakonun qoruyucu halqası zədələnməyib.

- Flakonu açmaq üçün başlığını tam fırladaraq qapağın qoruyucu halqasını qırmaq lazımdır.
- Həkimin məsləhətinə uyğun olaraq hər gözə 1-2 damcı damcılatmaq lazımdır.
- İstifadədən sonra flakonu kip bağlamaq lazımdır.

EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ:

- Çirkəlmə ehtimalının qarşısını almaq üçün damcıtokənin ucunun hər hansı səthə və ya gözə təmas etməsindən qaçınmaq lazımdır.
- Tərkibindəki komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq olarsa məhsuldan istifadə etmək olmaz.
- Bəzən zəif dərəcədə həssaslığın artması göz qırpmadan sonra keçən qısamüddətli yağı hissi və yaxud instillyasiya zamanı qıcıqlanmanın yaranmasına səbəb ola bilər.
- Məhlulu udmaq olmaz.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.
- Flakonu açdıqdan sonra məhlulu 90 gün ərzində istifadə etmək lazımdır.
- Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra məhsuldan istifadə etmək olmaz.
- Əgər əlamətlər davam edərsə həkimə müraciət etmək lazımdır.
- Flakon zədələnməmişdirsə məhsuldan istifadə etmək olmaz.
- Birbaşa günəş şüalarından qorumaq lazımdır.

SAXLANMA ŞƏRAİTİ:

5-35°C temperaturda, birbaşa günəş şüalarından qorunan yerdə saxlamaq lazımdır.


3 ml (pulsuz nümunə)

REF D3VXP103

10 ml

REF D10VXP102

STERILE A

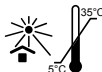

Distribyutor in Azerbaijan and Georgia:

BIH Pharmaceuticals Ltd
Sofia - 1404, Triadica district,
Kostenski Vödpod str.45/V/3, BULGARIA

NOVAX[®] PHARMA
Le Coronado
20, Avenue de Fontvieille
MC 98000 - MONAKO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V4 - Rev. 19/02/2019